



メディコムジャパンは、全国マスク工業会の会員です。

メディコムジャパンのマスクは、全国マスク工業会の定める『マスクの表示・広告自主基準』と『衛生マスクの安全・衛生自主基準』を遵守したマスクです。安心してお求めください。

Safe+Mask[®]

Premier

メディコムセーフマスクプレミア
ラテックスフリー



新規格 ASTM F2100-11 対応サージカルマスク



●BFE \geq 98.0% ●PFE \geq 98.0% (0.1 μ m)

品番	カラー	サイズ	入り数	JANコード
2014M	ホワイト	縦89×横178mm	1ケース/10箱(50枚/箱)	4897008632878
2015M	ブルー	縦89×横178mm	1ケース/10箱(50枚/箱)	4897008632885
2016M	ピンク	縦89×横178mm	1ケース/10箱(50枚/箱)	4897008632892
2017M	イエロー	縦89×横178mm	1ケース/10箱(50枚/箱)	4897008632908
2018M	グリーン	縦89×横178mm	1ケース/10箱(50枚/箱)	4897008632915
2011M	ラベンダー	縦89×横178mm	1ケース/10箱(50枚/箱)	4897008632861

セーフマスクプレミアの特長

- 新規格 ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格) に対応した液体防護性サージカルマスクです。
- 液体防護性に優れ、血液・体液の飛散から口や鼻を守ります。(合成血液不浸透性 \geq 80 mm Hg)
- 三層構造で耐水性に優れ、ノーズピース内蔵で呼吸が楽なマスクです。
- 高性能フィルター内蔵で BFE \geq 98%の高精度を実現しています。
- イヤーストラップには、ソフトな平ゴムを採用しています。ラテックスフリーです。

【メルトブロー不織布】 中心

(ポリプロピレン100%)

ポリマーを高圧で押し出すと共に熱風で吹き飛ばして作る軽くてフィルター性が高い極細繊維の不織布を使用しています。


【アルミ製ノーズピース】

長くて丈夫なノーズピースによりマスクの密着性を最大限に高めています。

【スパンボンド不織布】 外側

(ポリプロピレン100%)

軽くて強度がある不織布を使用しています。撥水性の高い特殊素材は、細菌やウイルスを含んだ水溶液等が口の周りやマスクに覆われている皮膚に付着するのを防ぎます。

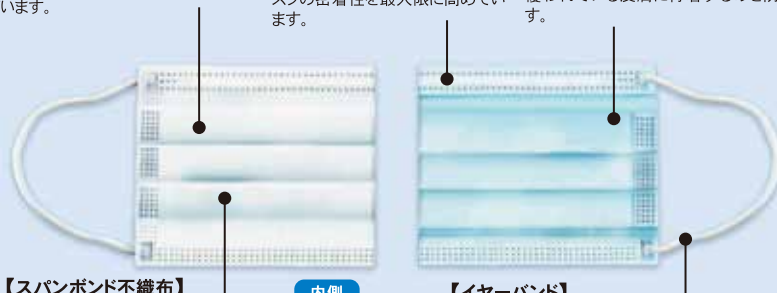

【スパンボンド不織布】 内側

(ポリプロピレン100%)

ASTM (アメリカ材料試験協会) 高レベル汚染防御規格対応の撥水能力素材。肌に触れても毛羽立たないすべすべしたとても肌触りの良い不織布を使用しています。

【イヤーストラップ】

丈夫でソフトなラテックスフリー素材。皮膚に刺激を与えないよう、マスク外側に取り付けられています。ミシン目穴や接着不良が発生しない超音波装着方式でマスクと一体化させています。

